

3M Sof-Lex Sistema de Terminado y Pulido. Técnicas

Consejos Clínicos



1. Simplemente presione el disco sobre el mandril sin importar si el lado abrasivo queda hacia arriba o bien hacia abajo. Mantenga la superficie y el disco secos mientras efectúa el terminado.



10,000 RPM C

2. Comience con los **discos de grano grueso** para remover el excedente de material restaurador y establecer una anatomía preliminar.



10,000 RPM M

3. Utilice los **discos de grano mediano** mientras avanza en el contorneo, estableciendo crestas marginales y ajustando bordes incisales.



30,000 RPM F

4. Continúe con los **discos de grano fino** para mejorar la calidad del terminado y preparar la superficie para el pulido final.



30,000 RPM SF

5. Concluya el pulido con los **discos de grano superfino** para obtener el terminado más durable, suave, con aspecto de brillo superior.



6. Utilice las **tiras Sof-Lex** para terminar áreas proximales insertando gentilmente la brecha central de la tira entre los dientes. La secuencia operatoria de las tiras (G, M, F y SF) es la misma que los discos.

Consejos Clínicos

- Toque ligeramente y utilice una pieza de mano de baja velocidad durante todas las fases del terminado y pulido.
- No seguir la secuencia recomendada comprometerá la calidad del pulido final.
- Enjuague y seque la superficie entre la secuencia de los discos.
- Los discos deben ser movidos constantemente sobre la superficie que se está puliendo para prevenir la generación de calor y puntos planos.
- Minimice el potencial de formación de "líneas blancas" en los márgenes rotando todos los instrumentos de terminado y pulido de la restauración hacia el diente.
- Invierta la dirección de rotación de los discos entre el uso de cada grano en la secuencia de pulido.

3M™ Sof-Lex™

Este sistema cuenta con tiras y discos de terminado, contorneado y pulido de todos los grosores y texturas necesarios para el trabajo más profesional.

3M Sof-Lex Tiras de Terminado y Pulido



3M Sof-Lex Discos de Contorneado y Pulido



3M Sof-Lex Discos de Contorneado y Pulido Extra Delgados



La diferencia que hace brillar su trabajo



Además utilizándolo con la familia **Filtek™** obtendrá restauraciones duraderas y altamente estéticas.


3M Sof-Lex Sistema de Terminado y Pulido y restauradores Filtek

Usar el sistema de terminado y pulido Sof-Lex en combinación con la familia de restauradores Filtek le permitirá obtener restauraciones duraderas y altamente estéticas.

Filtek le ofrece la línea más completa de restauradores anteriores, posteriores y universales que le brindan:



- Amplia selección de tonos para los mejores efectos estéticos.
- Fácil acabado y pulido para resultados superiores y de apariencia natural.
- Excelentes propiedades físicas para resultados clínicos a largo plazo.
- Fácil técnica de uso para una rápida y precisa colocación.

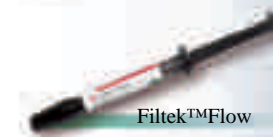

3M ESPE
Dental Products
3M Center, Building 275-2SE
St. Paul, MN 55144-1000

www.3m.com/dental



Papel reciclado
3M y Sof-Lex son marcas registradas de 3M.
© 3M 2001
70-2009-2358-2

El sistema más completo y preciso para dar el toque final a su obra maestra.



3M ESPE