

MOTOPEX

1º ENDO MOTOR sin escobillas de Woodpecker



MOTOPEX


1º ENDO MOTOR sin escobillas de Woodpecker

| Cabeza súper mini y cuello delgado | Potente motor | Rotación precisa | Balance de peso




Súper Mini Contra-ángulo


Localizador de ápices incorporado

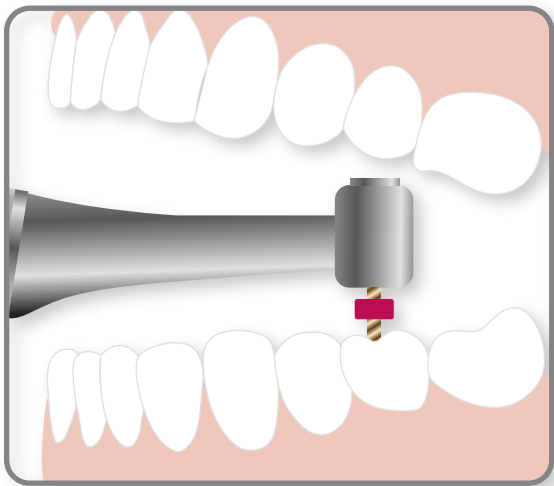



Cabeza y cuello de
contra-ángulo **normal**

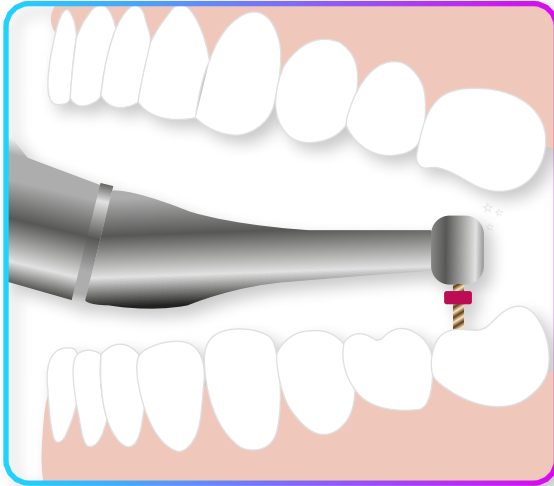

Cabeza súper mini y cuello
delgado de
contra-ángulo de Woodpecker

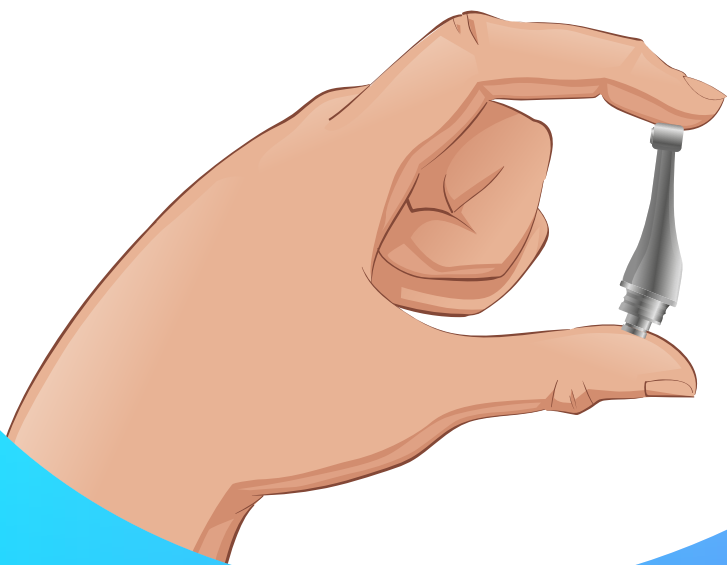

La
cabeza de
reducido tamaño,
con un diámetro de
8mm y una altura de
9,7mm brinda una mayor visión
durante el proceso endodóntico.

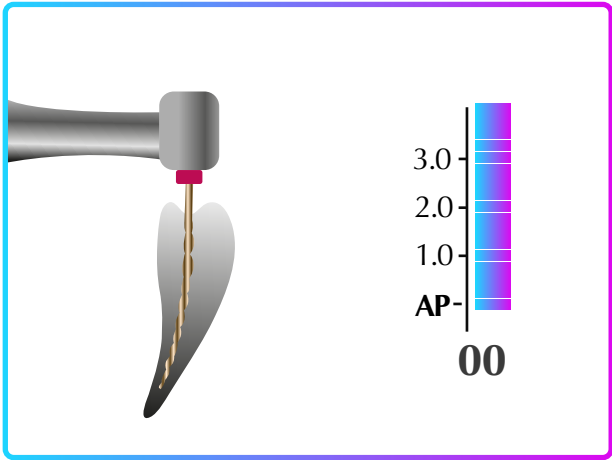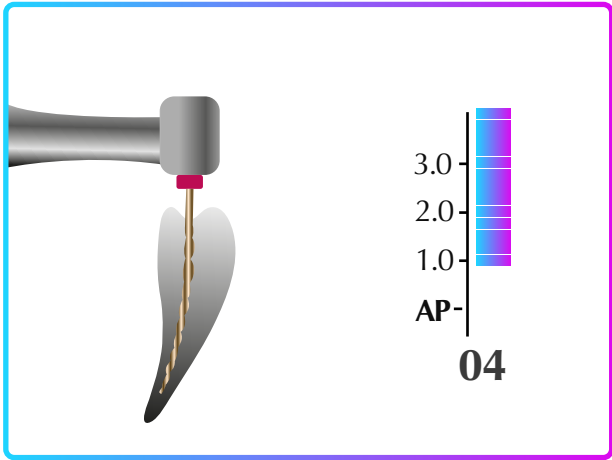


La determinación integrada de la longitud hace que el tratamiento endodóntico sea más seguro y eficiente. Se muestra en tiempo real la ubicación dentro del canal radicular. El motor para automáticamente o rota en dirección opuesta tan pronto como la lima llega al tope apical, para prevenir la perforación. Funciones de Auto Start y Auto Stop respectivamente permiten al motor comenzar automáticamente mientras la lima entra en el canal y para cuando sale.



Su rotación suave y los bajos niveles de ruido mejoran la experiencia del paciente.

La mayor potencia de este motor, y su par de torsión estable, hacen que la preparación del canal radicular sea más eficaz.

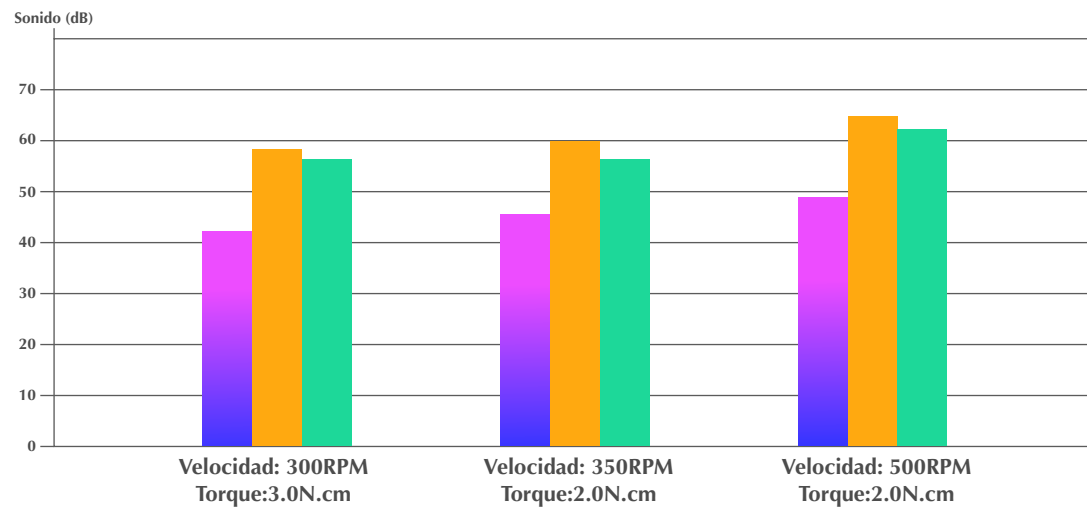


 MotoPex

 Marca asiática E

 Marca europea D



Motor Endodoncia sin escobillas
=Motor endodoncia con escobillas x10

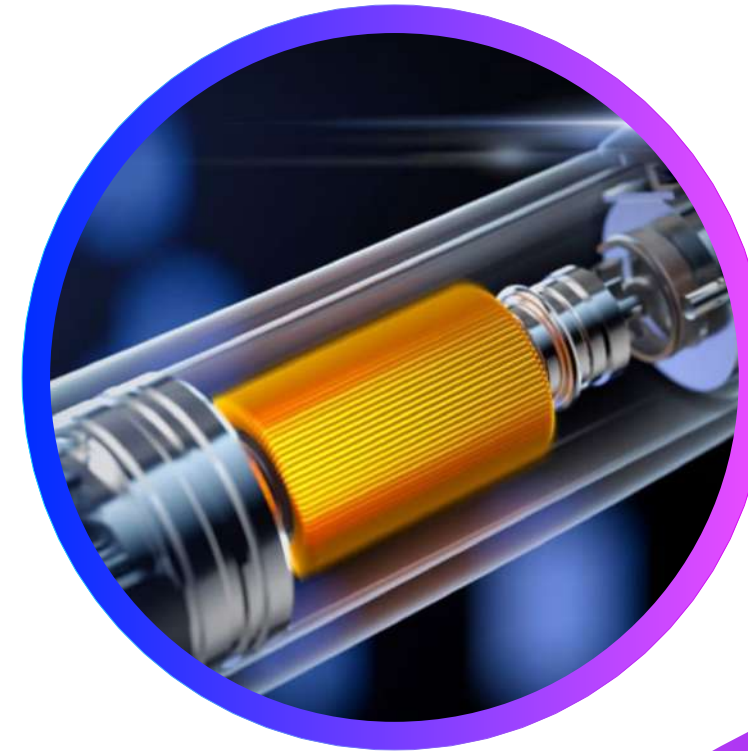

Motor Endodoncia sin escobillas
=Motor Endodoncia con escobillas x 10

Especificaciones técnicas primarias

Batería
Batería de litio en la pieza de mano del motor:
3,7 V / 2000 m Ah

Adaptador de corriente:
Entrada: 100V-240V 50Hz / 60Hz 400mA Max
Salida: DC5V / 1A

Rango de par:
0.4Ncm - 5.0Ncm (4mNm - 50mNm)

Rango de velocidad:
100 rpm - 1200 rpm