


**E-FLEX**  **REC**



# Sistema recíprocante de una sola lima con eficiencia increíble

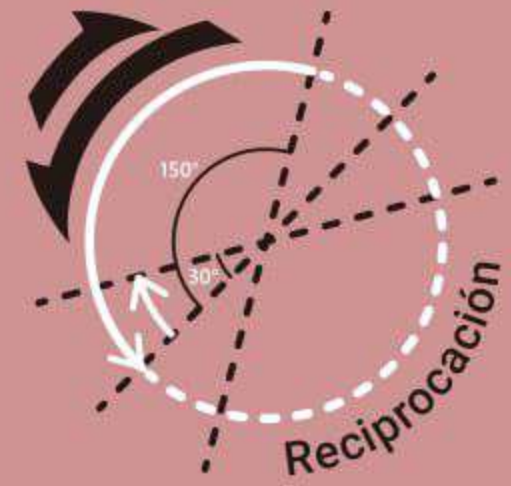

- **Color de Estándar ISO**

Indicar tamaño de punta

**Tapón**

## Cambio de Inclinación

Aumentar gradualmente desde la punta hasta el mango para evitar succión y bloqueo



## Ni-Ti con efecto térmico de memoria

Mejora la flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica para garantizar tratamientos seguros



**Indicador de Conicidad**



**Marca precisa de longitud**



**Filo de corte agudo**

Mejora la eficiencia de corte



**Sección transversal de doble S**


Eliminación eficiente de residuos



**Punta segura sin corte**

Reduce formación de escalón y extrusión apical, y minimiza la desviación del conducto

## • Protocolo de uso

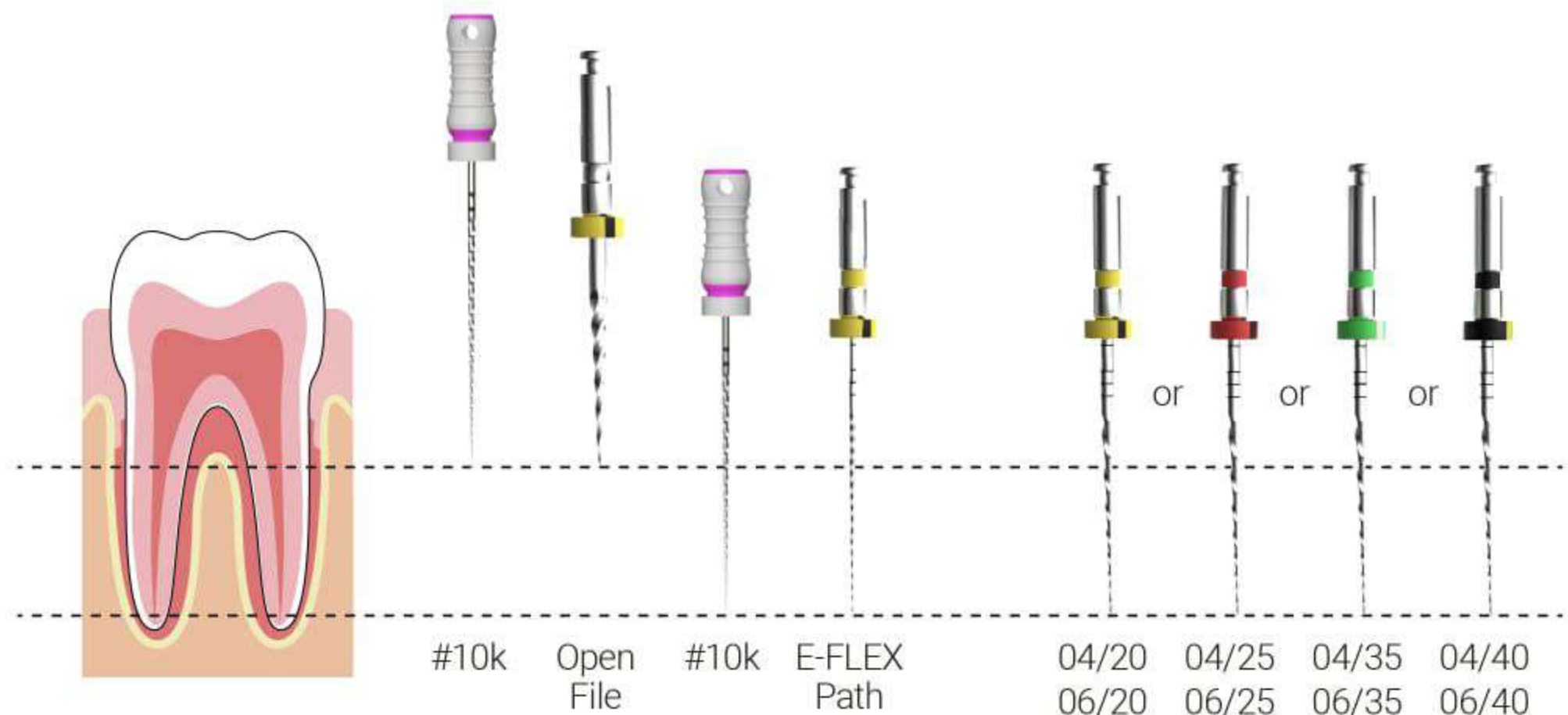



	Color	Tamaño de Punta	Conicidad (%)	Indicador de Conicidad	Sección transversal	Longitud (mm)	Ángulo Sugerido
<b>E-FLEX REC</b>	●	20	4			21/25/31	RWD: 30° REV: 150°
	●	25	4				
	●	35	4				
	●	40	4				
	●	20	6				
	●	25	6				
	●	35	6				
	●	40	6				

